

Lumicell
Wave7

[LE CORPS DONT VOUS RÊVEZ]

STOP À:

- **LA CELLULITE**
- **LA PEAU D'ORANGE**
- **LA PEAU RELÂCHÉE**

Des soins ciblés
à chaque zone
du corps

Une réponse à
chaque besoin:
lissage,
tonification,
drainage

Programmes
sur-mesure



BRAS



ABDOMEN



CUISSES + FESSIER



GENOUX



MOLLETS




SILHOUET-TONE

Qu'est-ce que la cellulite?

La cellulite (ou capitons) est liée à la présence et à la taille de cellules graisseuses (adipocytes) logées sous la peau, dans certaines zones du corps de la femme principalement. Les adipocytes ont la particularité de gonfler et de s'hypertrophier, ce qui donne aux zones concernées, cet aspect peau d'orange inesthétique.

L'apparition et l'aggravation de la cellulite est un cercle vicieux : en augmentant de volume, les adipocytes écrasent les vaisseaux sanguins et empêchent l'élimination des toxines... plus il y aura de graisses sous la peau et de rétention d'eau, plus son aspect sera aggravé.

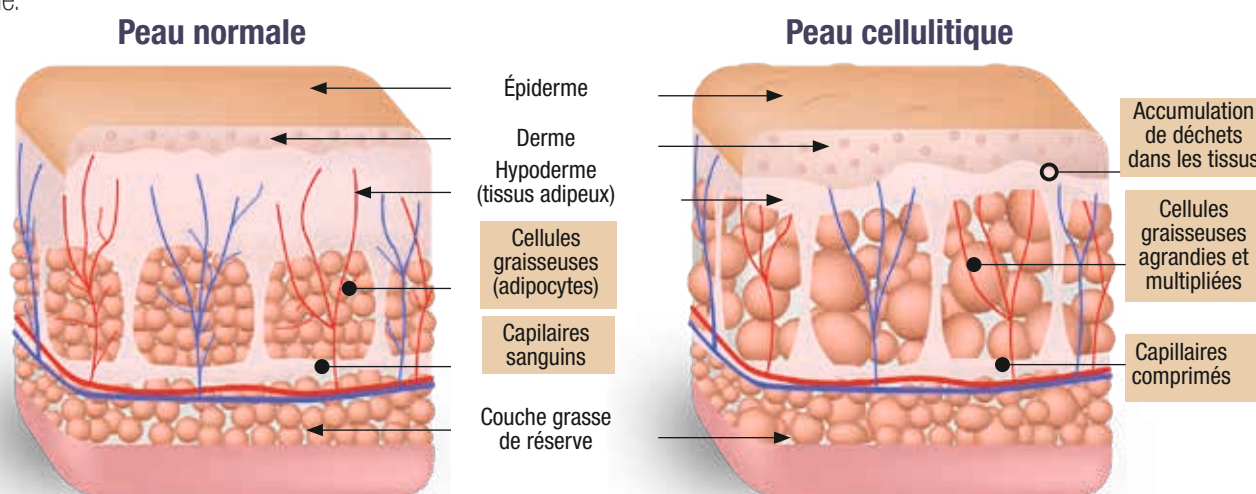

Comment la repérer?


- Capitons • Gonflements • Jambes lourdes • Dépôts graisseux localisés • Perte de fermeté • Douleur

La cible

Majoritairement les femmes,
mais aussi les hommes

Tous les phototypes

Toute l'année

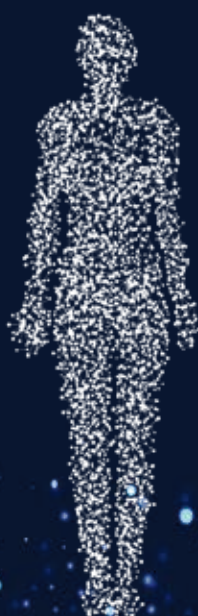

Toutes les zones du corps:
bras, abdomen, cuisses et fessier,
genoux, mollets

Tous les stades de cellulite (1 à 4)

Tous les problèmes liés à la cellulite

et les problèmes liés à ce phénomène, en combinant 4 technologies selon les besoins des clients*



Le Massage Photopneumatique

Améliore la circulation et détend le tissu conjonctif entourant les dépôts graisseux qui causent le capitonnage de la peau.



Les Infrarouges

Réchauffent la peau en profondeur, la rendant plus malléable et réceptive aux technologies.



Les Ultrasons

Dispersent la chaleur dans les couches adipeuses, stimulant la lipolyse.



La Radiofréquence Toroïdale

Entreprennent le remodelage du collagène et améliorent la texture de la peau. Le drainage des graisses est stimulé, la circulation sanguine et lymphatique sont activées, le tissu dermique est renforcé.

Objectifs

- Déstocker naturellement les graisses rebelles,
- Lisser chaque identité de cellulite,
- Raffermer et assouplir la peau,
- Retrouver des jambes légères,
- Agir sur le bien-être en général.

Pour une prise en charge à 360° de toutes les formes corporelles en respectant la peau.

Avantages

EFFICACE

INDOLORE

SÉCURITAIRE

CERTIFIÉ



*Tout dépend de la problématique de départ, de la physiologie propre à chaque individu, à l'assiduité des rendez-vous, aux habitudes alimentaires associées à une activité sportive et au stade de cellulite.

Les technologies

4 technologies incontournables pour le traitement de la cellulite et les problèmes associés

4 têtes de traitements ergonomiques

Pour cibler **TOUS** les problèmes liés à la cellulite en combinant les technologies médico-esthétiques les plus performantes du marché.



Massage Photopneumatique = dermo-lipo aspiration sous vide pulsé

Technologie 100% naturelle, non invasive et indolore

- 10 niveaux de pompage suivant la zone à traiter et le stade sélectionné
- 4 Rouleaux texturisés (2 par tête)
- 2 formats disponibles (S ou L) s'adaptant à tous les reliefs du corps

Les mouvements d'aspiration et de massage procurent un effet drainant qui améliore la circulation sanguine et lymphatique.

Les bandes de tissu conjonctif entourant les dépôts graisseux responsables du capitonnage de la peau sont détendus.

Les têtes de traitement glissent à même la peau à l'aide d'une huile hydrosoluble spécifique, sans provoquer de torsion tout en respectant la physiologie cutanée.

Elles permettent d'effectuer la technique de:

- **palper rouler,**
- **tractions ponctuelles** et
- **tractions rectilignes.**

Les résultats sont obtenus durablement de façon saine.

L'aspect de la peau apparaît plus lisse et plus ferme.





LED Infrarouges à 830 nm

Technologie 100% naturelle, non invasive et indolore

- Diffusion constante
- 14 LED IR à 830 nm
- 13 milliwatts/cm² émis en moyenne
- 2 LED témoin jaunes à 590 nm

Fondées sur le principe de bio-stimulation par infrarouges elles pénètrent les tissus sous-cutanés sans échauffer l'épiderme.

Sous leur action, les mécanismes naturels par lesquels le corps se régénère sont stimulés et provoquent diverses réactions physiologiques, d'où le terme de «bio-stimulation par infrarouges».

Il s'agit d'ondes électromagnétiques courtes qui réchauffent la peau de l'intérieur, la rendant plus malléable et plus réceptive à l'action de roulement des têtes de traitement, étirant les bandes fibreuses sans risque.

Cette technologie est intégrée dans la tête de traitement du massage photopneumatique.



Ultrasons

Technologie non invasive et indolore

- Basse fréquence de 1 MHz
- Non focalisés
- Continus
- Effet mécanique

Ils produisent un réchauffement local des couches graisseuses et agissent sur la circulation sanguine et lymphatique. Ils stimulent l'activité des fibroblastes et la synthèse du collagène.

Produisent un micro-massage et défibrosage par vibrations et micromouvements moléculaires.

Augmentent la perméabilité membranaire et donc la pénétration des produits.

Les ultrasons peuvent être utilisés seuls, en complément de la technique de Massage Photopneumatique avec ou sans les LED Infrarouges.



Radiofréquence Toroïdale


Technologie non invasive et indolore

- 1 MHz
- 20 W – Maximum 300 V
- Diffusion de chaleur constante et sécuritaire
- La température thérapeutique est atteinte rapidement comparativement à d'autres appareils.

Produit une élévation contrôlée et en douceur de la température du tissu dermique entre 40°C et 44°C, provoquant une sensation de chaleur agréable et confortable. Il se crée une réponse inflammatoire contrôlée qui stimule la production de néo-collagène. Le remodelage du collagène est amorcé, la texture de la peau est améliorée, elle retrouve son élasticité.

Elle livre une chaleur plus uniforme sur une surface plus large et à des profondeurs contrôlées, dans le derme et les couches sous dermiques.

Accélère la rétraction réversible du collagène ainsi que le remodelage ultérieur.
Rend le traitement plus efficace & confortable.

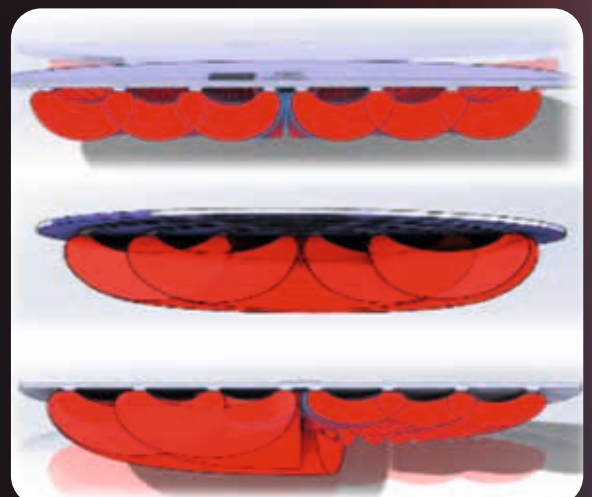

Sujet A - zone 1 - abdomen

Raffermissment cutané - Texture cutanée améliorée - Lissage des tissus - Drainage



Séance 1



Séance 3



Séance 12

Sujet A - zone 2 - bras

Raffermissment cutané - Texture cutanée améliorée - Lissage des tissus



Séance 1



Séance 3



Séance 12

Sujet B - zone 1 - cuisses + fesses

Texture cutanée améliorée - Aspect capitonné amélioré - Assouplissement des tissus
Peau moins indurée



Séance 1



Séance 6



Séance 16

Sujet C - zone 1 - cuisses côté

Raffermissment cutané - Texture cutanée améliorée - Lissage des tissus - Drainage



Séance 1



Séance 13



Séance 21

Les modes de travail

PRO



Programmes complets mixtes pré-paramétrés en 2 étapes successives pour traiter les 4 stades de cellulite.

ZONES DE TRAITEMENTS

- Bras • Abdomen femme et homme
- Cuisses • Fessier • Genoux • Mollets

- ▶ Ajustables selon la sensibilité de la zone à traiter.
- ▶ Combinaison idéale de 3 technologies systématiquement proposée pour gagner en performance.
- ▶ Mode d'application des technologies visualisable à l'écran.

PRO +



Spécifiquement élaboré pour traiter différentes parties du corps sujets à des problématiques plus thérapeutiques chez la femme et l'homme.

TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

- Pré lipo • Post lipo • Post natal
- Drainage 1 et 2 • Vergetures
- Récupération musculaire • Post Cool

- ▶ En 1 ou 2 étapes selon le programme sélectionné.
- ▶ Combinaison de plusieurs technologies pour gagner en performance.
- ▶ Les différents programmes proposent un large choix de modulations selon les besoins par zone traitée et selon l'évaluation établie en début de traitement.

MODE MANUEL



Réglages manuels pour une prise en main totale du système.

TRAITEMENTS PERSONNALISÉS POUR LES 3 SECTIONS DE BASE

- Massage photopneumatique
- Ultrasons • Radiofréquence Toroidale

POUR TOUS LES NIVEAUX

VIDÉOS D'APPLICATION DURANT LE TRAITEMENT

INFOS PRODUITS À APPLIQUER

MANUEL D'UTILISATION INTÉGRÉ

TRAITEMENT INSTITUT PROPOSÉ:
PROTOCOLE DE SOIN SPÉCIFIQUE
ANTI-CELLULITE – MULTI-ZONES



Traitements personnalisés

Chacune de ces technologies peut être utilisée seule pour des soins à part entière:

- le massage photopneumatique,
- les ultrasons,
- la radiofréquence toroïdale.

Les technologies peuvent être combinées ou utilisées seules selon vos besoins et les problématiques de vos clients.

Personnalisez vos soins pour plus de résultats avec les combinaisons suivantes:

1. Massage Photopneumatique seul
2. Massage Photopneumatique + Infrarouges
3. Massage Photopneumatique + Infrarouges + Ultrasons
4. Massage Photopneumatique + Infrarouges + Radiofréquence Toroïdale
5. Ultrasons seuls
6. Massage Photopneumatique + Ultrasons
7. Radiofréquence Toroïdale seule
8. Massage Photopneumatique + Radiofréquence Toroïdale



Le traitement est **personnalisable**.

Un nombre de séances et un programme sont recommandés selon le stade de cellulite évalué et la zone à traiter (ou problématique).

Les paramètres sont préenregistrés pour guider l'opérateur au fil des séances.

La séance est animée par une vidéo pédagogique démontrant l'application de la technique en cours.

SILHOUET-TONE CORPORATION
2185, Michelin, Laval (Québec) H7L 5B8 Canada
Tél.: 450 687-9456, 1 866 340-9456
Téléc.: 450 687-5155
info@silhouettone.com

SILHOUET-TONE (U.S.A.)
2043 NW 87th Avenue, Miami, Florida 33172 U.S.A.
Tél.: 1 800 552-0418
stusa@silhouettone.com

SILHOUET-TONE (EUROPE) SA
9, route Suisse, CH-1295-Mies, Suisse
Tél.: +41 22 775-15 60
Téléc.: +41 22 775-15 67
sts@silhouet-tone.com

SILHOUET-TONE FRANCE Sarl
14, avenue du Dr Palluel
74160 St-Julien-en-Genevois, France
Tél.: +33 4 50 49 45 32
Téléc.: +41 22 775-15 67
stf@silhouet-tone.com

Tout droit de traduction et d'adaptation; toute reproduction d'un extrait quelconque de ce document par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans l'autorisation de Silhouet-Tone Corp.
Pour usage professionnel seulement.
© Silhouet-Tone Corporation

Code: 422168